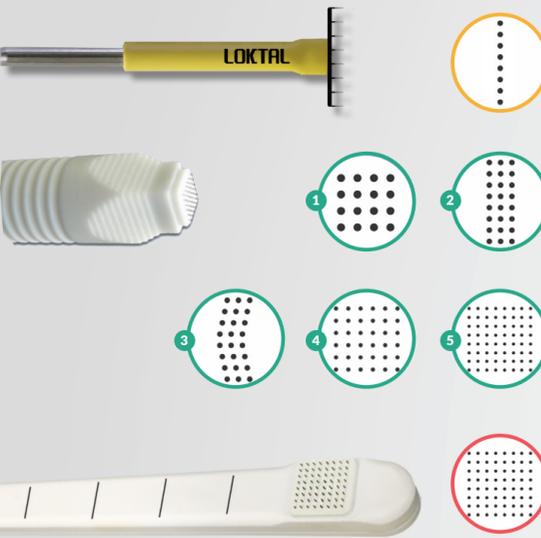


PIÈCES À MAIN

FORMATION ET SAV

Découvrez l'unité de radiofréquence la plus polyvalente en esthétique médicale



ÉLECTRODE D'OCULOPLASTIE MULTIAIGUILLES EN TUNGSTÈNE POUR RF PULSÉE LIMA (USAGE UNIQUE)


ACEL1552 | Ø 0,1 mm | 8 aiguilles | Longueur des 8 aiguilles : 2 mm

PIÈCES À MAIN "FRAXX" POUR UTILISATION EN RADIO FRÉQUENCE FRACTIONNÉE MICRO-ABLATIVE (RFFMA)

- 1 ACEL0257 | Ø 0,2 mm | 16 aiguilles (4x4)
- 2 ACEL0258 | Ø 0,2 mm | 24 aiguilles (8x3)
- 3 ACEL0259 | Ø 0,2 mm | 24 aiguilles courbes (8x3)
- 4 ACEL0256 | Ø 0,2 mm | 32 aiguilles (8x4)
- 5 ACEL0255 | Ø 0,2 mm | 64 aiguilles (8x8)

PIÈCE À MAIN "LINLY" POUR UTILISATION RFFMA

Ø 0,2 mm | 64 aiguilles (8x8)

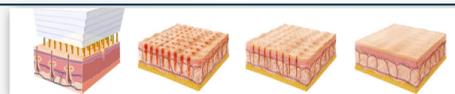

Fraxx FONCTION RANDOM EXCLUSIVE : distribution par impacts aléatoires :

Le système dispose d'un mode exclusif « smartshot » de contrôle des tirs fractionnés aléatoires. L'énergie subablative est distribuée avec précision ce qui permet de ne pas exciter simultanément tous les micropoints : mais ceux situés dans une séquence aléatoire prédéfinie (smartshot), en évitant la sommation de l'effet thermique latéral et en minimisant les dommages causés au derme et à l'épiderme. Les tissus adjacents aux micropoints vaporisés sont épargnés, parfaitement sains et aptes à produire une nouvelle collagenèse. Résultats : régénération du derme et de l'épiderme.

AIGUILLES QUALITÉ TUNGSTÈNE

L'ensemble des pièces à main et électrode sont fabriquées au Brésil au sein de la manufacture Loktal. Les aiguilles 100 % tungstène (pour une meilleure conduction électrique sans échauffement) sont recouvertes à la main d'une couche de céramique protectrice.

SOLUTION INTÉGRÉE, ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE



Formation et accompagnement des médecins
Une formation complète est assurée par nos instructeurs et médecins partenaires pour tout achat de matériel Loktal. Cette formation est délivrée aux équipes sur site. Nos supports techniques sont disponibles à tout moment.



Environnement dédié
Nous vous fournissons la documentation patients (docs salle d'attente) et des films de présentation des techniques utilisées.



SAV et révisions "all included"
Loktal, fabricant de matériel médical depuis 1990 est leader du marché brésilien. Nos techniciens agréés basés en France assurent le SAV et la maintenance des appareils pour une parfaite tranquillité des praticiens. Contrat de maintenance possible de 1 à 5 ans.



[MATÉRIEL GARANTI 2 ANS]



Des workshops d'initiation sont régulièrement organisés dans notre siège parisien. Pour connaître les dates et programmes de nos ateliers, rendez-vous sur www.loktal.fr.



40 000 unités vendues
Des milliers de patients traités



Haute fréquence
Basse température



En médecine et chirurgie esthétique

EN RÉSUMÉ



TECHNOLOGIE BRÉSILIENNE
40 000 unités de radiofréquence vendues depuis 1999. Les unités et accessoires sont fabriqués exclusivement dans les usines Loktal au Brésil (liste des accessoires sur demande)



L'UNITÉ LA PLUS POLYVALENTE DU MOMENT
Là où d'autres proposent des matériels adaptés à chaque spécialité, Loktal a développé une solution unique permettant d'accomplir un très grand nombre d'actes médicaux et chirurgicaux avec précision et sécurité. Notre matériel intègre des technologies les plus abouties pour garantir confort des actes et efficacité des résultats.



5 MODES POUR UNE UTILISATION À 360°
Mode MONOPOLAIRE, Mode BIPOLAIRE, Mode PLASMA FULGURATION, Mode PULSE, Mode RFFMA.



ENTIÈREMENT MODULABLE
Les unités fonctionnent comme des blocs associés selon les besoins des praticiens. L'ensemble des modules (Wavetronic, Megapulse Fraxx et Wavac Dual) couvrent 77 indications pour un traitement au cabinet.



ÉCRAN TACTILE
Écran de contrôle 4,3 pouces entièrement tactile pour une utilisation simple et conviviale.

CONTACT



- ✉ loktal75008@gmail.com
- 📞 Whatsapp // +336 38 68 84 32
- 📍 230, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris VIII^e - France
- 🌐 www.loktal.fr @ www.biomedcorp.com

Distributeur exclusif Loktal France et EU



Distributeur exclusif HSC France et EU



Distributeur exclusif FaceLabs France et EU



RFFMA Radiofréquence Fractionnée Micro Ablative



BIOMED BOX

INDICATIONS

MISE EN ŒUVRE (quelques exemples)

LOKTAL Lima

Blépharoplastie non chirurgicale
Poches malaïres et palpébrales
Rétraction cutanée
Rides périorbitales



- T.Q. Tungsten Quality**
- CONTENU
- ✓ 1 pièce à main
 - ✓ 10 électrodes LIMA 8 microaiguilles
 - ✓ Docs salle d'attente
 - ✓ Film de présentation

LOKTAL Fraxx

Rajeunissement (qualité de la peau)
Rides péribucales (code-barres)
Cicatrices de varicelle
Cicatrices d'acné
Taches pigmentaires
Relâchement cutané
Vergetures



- T.Q. Tungsten Quality**
- CONTENU Fraxx Code-barres
- ✓ 1 pièce à main Fraxx 32 aiguilles
 - ✓ Docs salle d'attente
 - ✓ Film de présentation
- CONTENU Fraxx Cicatrices
- ✓ 1 pièce à main 32 ou 64 aiguilles
 - ✓ Docs salle d'attente
 - ✓ Film de présentation

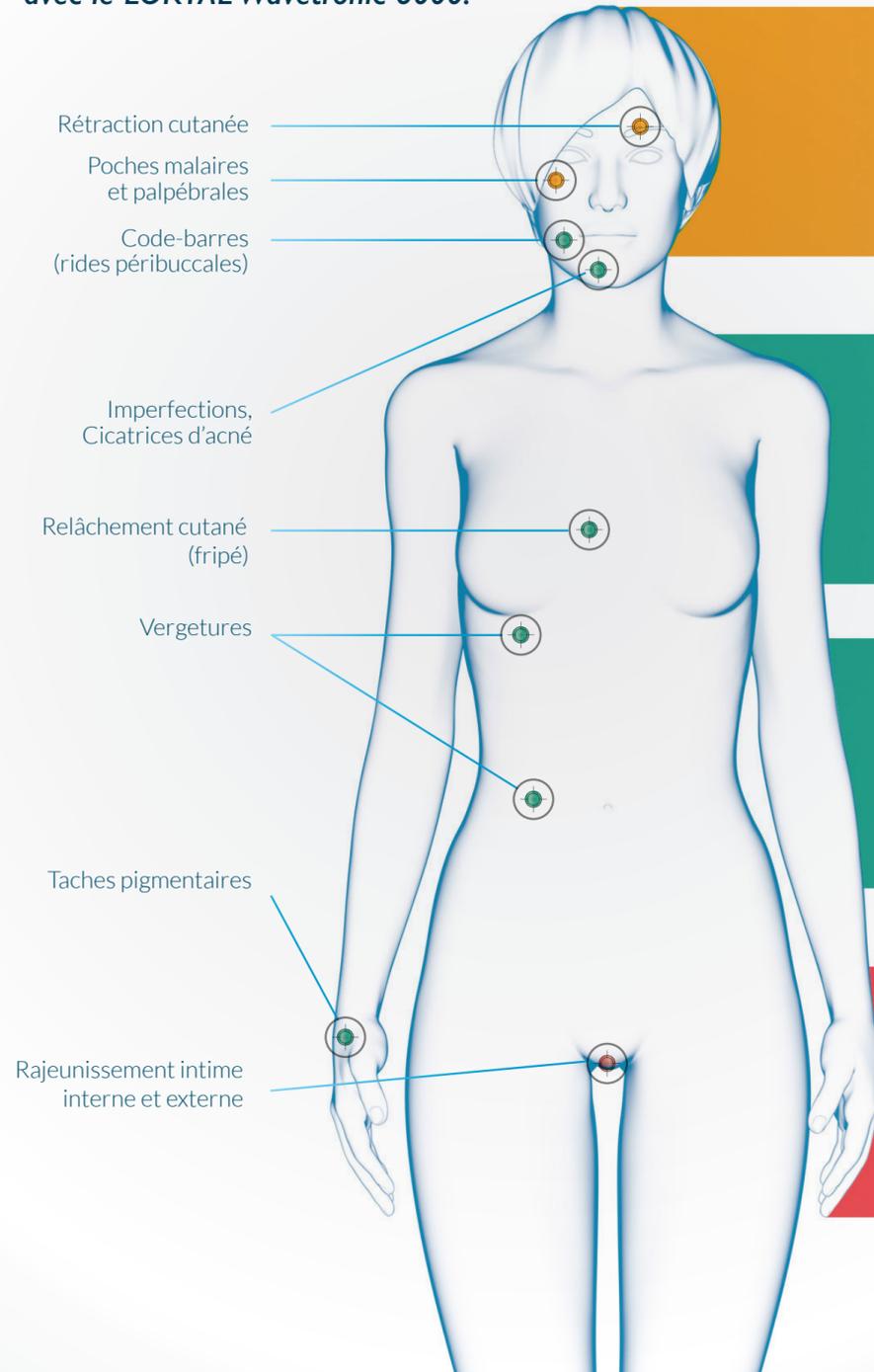
LOKTAL Linly

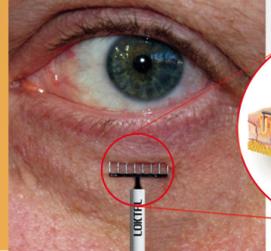
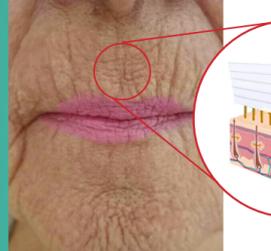
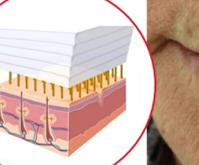
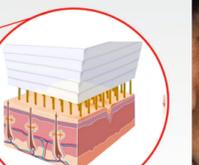
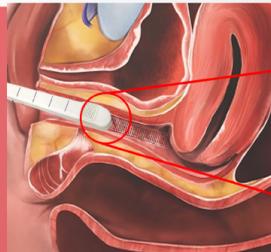
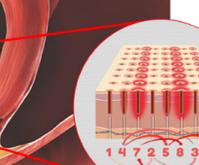
Rajeunissement vaginal
Rajeunissement de la vulve
Défaut d'hydratation vulvo-vaginale
Dyspareunie



- T.Q. Tungsten Quality**
- CONTENU
- ✓ 1 pièce à main Linly
 - ✓ Docs salle d'attente
 - ✓ Film de présentation

Toutes ces indications peuvent être traitées au cabinet avec le LOKTAL Wavetronic 6000.



Mode	Électrodes	Application	Résultats
<p>Regard</p>  <p>RF pulsée</p>	 <p>Electrode Multiaiguilles 8</p>	 	 <p>Avant l'intervention Après 2 séances</p>
<p>Code-barres</p>  <p>RF fractionnée</p>	 <p>Pièce à main Fraxx 64</p>	 	 <p>Avant l'intervention Après 2 séances</p>
<p>Cicatrices</p>  <p>RF fractionnée</p>	 <p>Pièce à main Fraxx 32</p>	 	 <p>Avant l'intervention Après 2 séances</p>
<p>Intimité</p>  <p>RF fractionnée</p>	 <p>Pièce à main Linly</p>	 	 <p>Avant l'intervention Après 2 séances</p>